


DEDAKJ®



德国品牌

GERMAN BRAND

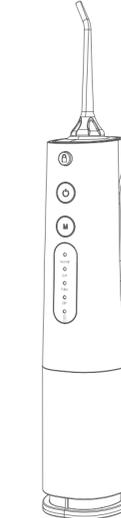

DK-EW51
手持式冲牙器

使用说明

为了能够更好的使用本产品，使用前请仔细阅读使用说明



德达商城公众号
扫码了解更多

运营商:深圳市德达医疗科技集团有限公司(中外合资)
地址:深圳市龙岗区横岗街道龙翔大道8288号大运软件小镇39-1栋
生产地址:深圳市龙华区观澜街道库坑社区同富裕工业区28栋朗嘉工业园2号301
商城网址:www.DEDAKJ.com
官网: www.dedakj.health.com 全国服务热线: 400-830-2119

产品目录

目录 01
特别提示 02
使用须知 03
重要事项 04
警示 04
产品描述 05
产品特点 05
使用指南 06
充电注意事项 06
推荐技巧 06
清洁指南 07
故障排查指南 08
产品参数 08

特别提示

- 电量查看: 产品待机时, 长按模式键会显示电量, 75%以上电量亮4个档位灯; 50%到75%电量亮3个档位灯; 25%-50%电量亮2个档位灯; 25%以下电量, 最下方的DIY模式灯亮起。
- DIY档位设置: 当切换到第四档时, 系统记忆上次设定的第四档状态开始工作; 在第四档工作模式下, 再次长按开机键, 工作状态由负载最低上升到负载最高且在最高时短暂停留, 照此模式不断循环; 松开开机键则表示选择档位中的该点工作状态 (新状态被设定), 系统保持刚设定的新状态运作。

产品配件:



标准喷嘴 X1
舌刮喷嘴 X1
牙周喷嘴 X1
正畸喷嘴 X1
USB充电线 X1
收纳盒 X1

使用须知:

- 初次使用者或长时间未使用时, 本产品 (冲牙器) 可能会出现这种现象: 按下电源开关后, 需等待片刻, 喷嘴才能喷出水流。此时, 请按以下方法进行作:
- 先吧内水箱抽拉到底, 听到咔嚓声后即内水箱已经抽拉到位 (内水箱未抽拉到位会有滴水) 再打开注水盖往水箱里装水。
- 往喷嘴的的安装口加入适量的水后, 再次安装喷嘴, 然后打开电源开关。
- 温馨提示:
1.初次使用的人群, 先从Soft档位开始使用, 试用一段时间后可选择更强劲的Pulse 或Normal档。
标准 (Normal): 适用于牙齿的深度清洁;
柔和 (Soft): 适用于初次使用者和敏感牙齿类型, 如刷牙经常有出血的人群, 以及正在换牙, 补牙的人群;
按摩 (Pulse): 适用于按摩牙龈, 促进血液循环, 改善牙龈健康。


重要事项:

- 不可拆机自行维修内部组件
- 本产品的喷头配件可与本公司生产的喷头配件相替换
- 使用前和使用后应始终注意检查电源线是否损坏, 且电源线远离受热表面
- 切勿在任何开口的地方或者软管中放入或插入异物
- 切勿在非干燥环境下, 触碰本产品电源或者对产品进行充电
- 切勿把产品放置或存放在可能掉落或拉扯入浴盆、淋浴间或者游泳池的地方
- 该产品的水箱中只能注入水或者其他由专业医生推荐的无任何腐蚀性溶液

警示:

- 如果您在过去2个月内做过口腔或者牙科手术, 在使用本产品前请咨询手术主治医生, 遵循医生建议和指导。
- 首次使用该产品进行口腔清洗时, 即使在牙龈健康的情况下, 您也会遇到牙龈轻微出血的现象, 这是由于您的牙龈首次受到喷射压力的刺激, 一般在适应1~2周之后会停止出血。若出现持续2周以上的牙龈出血, 可能意味着您的牙龈出现牙周疾病等异常情况, 此时, 请停止使用该产品, 并咨询您的牙科医生。
- 如果本产品出现电源线或者插头破损、不能工作、摔落、损坏、或者落入任何液体中等情况, 切勿使用本产品。
- 请勿将本产品连接至本设备或充电器之外的电压系统。
- 在没有监护人知道的情形下, 本产品不适用于生理、感知或心理能力欠佳或缺少经验认知的人 (包括儿童)。
- 切勿将在使用冲牙器功能时的水注入舌下、耳朵、鼻子或其他敏感部位。本产品产生的压力可能对这些部位造成严重伤害。
- 切勿将超过40°C的水装入水箱中。

产品描述:

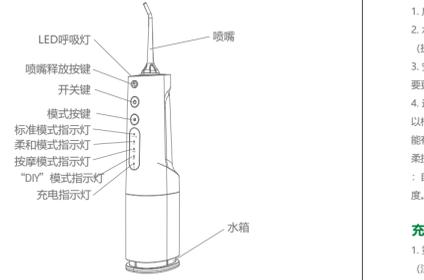

注意: 产品里可能会有一些液体剩余在水箱里, 这是出厂检验时残留的蒸馏水, 不存在健康安全隐。

产品特点:

- 360ml可拆卸伸缩式水箱, 体积小巧, 携带方便, 水箱易于清洁。
- 我们结合不同使用场景需求, 添加炫彩呼吸灯元素, 柔和的灯光效果搭配三色指示灯状态, 带给您不一样的使用体验。
- IPX7级全身防水可在淋浴时使用, 支持全身水洗。

使用指南:

- 启动工作: 第一次使用前务必将产品充满电, 先按开关按钮, 再按模式选择按钮;
- 水箱注水: 打开水箱的注水口, 往水箱中注满水, 关紧注水口, 并用力按压泵; (提示: 水箱可拆卸, 可以拆卸下来进行注水, 操作时不得启动和使用。)
- 安装喷嘴: 将喷嘴插入冲牙器喷头口 (在冲牙器手柄的顶部) 的中间位置, 如果需要更换或者取下喷嘴, 请按手柄的喷嘴锁制键, 然后将喷嘴取出;
- 选择档位: 首次使用时, 轻触手柄上的模式选择按钮, 选择适合的刷牙模式, 也可以根据专业牙医的指导来选择刷牙模式。(正常模式 (Normal): 标准清洗模式, 能有效的清除牙齿缝隙中的食物残渣, 深度清洁, 清新口腔; 柔和模式 (Soft): 轻柔按摩牙龈; 脉冲模式 (Pulse): 脉冲按摩牙龈, 促进血液循环; 自定义模式 (DIY): 自定义清洗强度; 用户根据个人喜好调节大小, 可在范围内随意设定各种的清洗强度。)

充电注意事项:

- 第一次使用前, 请先将产品充电8小时。
(注: 请使用标准充电器对本产品进行充电。)
- 把充电座的接口盖子打开, 将USB插头插入电源座的充电插孔中(确保插入插头前插孔中没有残留液体)。
- 将USB接口插入充电器, 再将充电器插入电源插座。
- 充电时, 充电指示灯红色且会有微弱闪烁。充满电后, 充电指示灯会一直显示绿色, 直到拔掉电源插头。

推荐技巧:

- 手握主机使其直立, 喷嘴末端朝向牙齿。
- 使用时请保持该产品与口腔垂直, 以获得最佳的效果。口腔微张开, 以便冲进口中的水可以流出。
- 水流形成一定角度喷向牙齿和牙龈, 沿着牙齿缓慢的移动喷射水流。

清洁指南:

- 切勿将设备浸入任何液体中。
- 水箱:**
取下水箱, 请用软布或者家用洗洁精来清洗, 然后冲洗干净。
- 清洁前, 请从电源插座中拔出插头。
 - 在将产品暴露于冻结温度环境之前, 请务必移除水箱并将其中的水耗尽。
 - 用刷子或类似物品洗掉污垢, 然后用布擦干净。
 - 长期不使用时请晾干水箱。

喷嘴:

- 按住喷嘴释放按钮将其取出。用水清洗后用布擦拭。
- 建议每3个月左右更换一次新的喷嘴。否则, 喷嘴会变大而无法完成有效的清洁。甚至会导致故障。

主体:

- 用沾有中性洗涤剂的去渍布拭擦, 然后用干布擦拭干净。如果非常脏, 可以用水清洗。
- 请勿使用酒精、汽油、稀释剂等溶液擦拭本产品。
 - 请勿用高于50°C的热水清洗。
 - 用水清洗后, 请擦干水分。

吸水管:

- 用水清洗后用布擦拭。
- 勿弯折吸水管。否则导致吸水管工作中停止吸水等故障。
- 吸水管的过滤网需及时清洁, 防止堵塞。

水箱盖:

- 擦掉污垢, 否则会导致漏水。

故障排查指南:

问题	原因	解决方法
喷嘴开裂	喷嘴损坏严重	更换新的喷嘴
水箱堵塞	密封圈破损	更换密封圈, 退回厂家维修
	水箱中留有液体	确保使用后抽空水箱
喷嘴接口之间漏露	水箱盖未关好	关闭水箱盖
	喷嘴没有完全咬合	卸下喷嘴并重装
无液体流动或压力不足	设备位置	喷嘴必须高于水箱
	水箱中液体不足	水箱中注满液体
	模式不对	将模式调为 "Normal"

产品参数:

充电电压: DC 5V --- 1A
压力范围: 30-120 PSI
开关方式: 按键式开关
防水等级: IPX7
工作模式: Normal, Soft, Pulse, DIY
水箱容量: 360ml
电池容量: 3.7V/2000mAh锂电池
执行标准: GE 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

产品保修卡

承蒙选购本公司产品, 如有故障, 可凭本保修卡或购买发票, 自购买日期一年以内, 享受免费维修。如有以下状况时, 虽在保修期内, 亦酌情收取材料成本或服务费, 敬请谅解。

- 未出示保修卡或购买发票者。
 - 人为使用不当操作错误导致损坏者。
 - 因火灾, 地震等导致损坏者。
 - 自行修理或改装而发生故障者。
- 注: 本公司保留以上内容的最终解释权

DEDAKJ
合格证
Certificate

产品名称: 手持式冲牙器
产品型号: DK-EW51

执行标准: GE 4706.1-2005
GB 4706.59-2008

检验日期: _____
检验员: _____

深圳市德达医疗科技集团有限公司(中外合资)
官方服务热线: 400-830-2119